



Handboor

Gebruiksaanwijzing

V2 juni 2025

Belangrijke informatie

Lees vóór gebruik

Indicaties:

De Delta-handboor is geïndiceerd wanneer boren vereist is in combinatie met een geschikt boortje (niet meegeleverd).

Contra-indicaties:

Dit hulpmiddel is niet ontworpen, wordt niet verkocht en is niet bedoeld voor enig ander gebruik dan aangegeven.

Complicaties:

Het boortje kan losraken in de boorspankop. Zorg ervoor dat de spankop vóór gebruik volledig is vastgedraaid.

Voorzorgsmaatregelen:

Om wegglijden van het boortje te voorkomen, draait u langzaam totdat het boortje volledig vastzit.

Beschrijving:

Delta-handboor D-5001-CM.

Steriliteit:

De Delta-handboor is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik, niet opnieuw steriliseren.

Fabrikant



Name: Shenzhen Ruixie Industrial Co. Ltd.
Address: East Side, 1/F., No.1 Building, Hengguan Industry Zone, Xinqiao Shajing, Baoan, Shenzhen, China

Europese vertegenwoordiger



Name: MedPath GmbH
Address: Mies-van-der-Rohe Strabe 8, Munich, 80807 DE



Handboor
Gebruiksaanwijzing



+44 (0)1782 637009



sales@deltasurgical.co.uk

Let op

Lees alle instructies vóór gebruik

Dit product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik, niet opnieuw gebruiken.

- Niet gebruiken als de binnenvpakking of het product beschadigd is
- Gebruik dit product niet na de vervaldatum
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde boortjes*
- Het product is een medisch hulpmiddel. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze vóór gebruik beschikken over de relevante expertise en klinische training
- Zorg dat u de instructies hebt gelezen en begrepen voordat u deze wegwerpbare handboor gebruikt*
- Bedien het hulpmiddel vóór elk gebruik door de handgreep en boorspankop respectievelijk rechtsom en linksom te draaien en controleer elke component op beschadiging. Gebruik GEEN componenten als er schade wordt gedetecteerd*
- Oefen geen overmatige druk uit, laat het boortje vrijuit draaien*
- De juiste draaisnelheid is belangrijk voor de chirurgische ingreep. Draai de handgreep voorzichtig en langzaam
- Na het installeren van het boortje inspecteert u het en controleert u of het is vastgezet voordat u de handboor gebruikt
- Voer de gebruikte handboor af volgens de wet- en regelgeving van de afvoermethode voor medisch afval. Niet-naleving hiervan kan leiden tot milieuverontreiniging en persoonlijk letsel

***Het niet naleven hiervan kan leiden tot letsel bij de patiënt en/of het medisch personeel**

Lees beide zijden van deze instructies

Gebruiksaanwijzing

- 1** Voer alle procedures uit in overeenstemming met de gevestigde klinische technieken en protocollen.
- 2** Handgreepbevestiging - Vouw de handgreeparm uit en vergrendel deze in de open stand. Controleer of de handgreep stevig vastzit (zie afbeelding A).
- 3** Selectie en installatie van het boortje - Selecteer het juiste boortje voor de procedure en plaats het in de spankop zoals weergegeven in afbeelding B.
OPMERKING: Om de spankop breder af te stellen voor de boordiameter, draait u de spankop linksom.
- 4** Het boortje vastzetten - Draai het boortje vast met de meegeleverde spankopsleutel om ervoor te zorgen dat het stevig op zijn plaats zit. Oefen gelijkmatige druk uit door de spankopsleutel op alle drie de aangewezen punten rechtsom te draaien, waarbij u zorgt voor een nauwkeurige uitlijning (zie afbeelding C).
- 5** Verificatie van booruitlijning - Draai de handgreep zowel rechtsom als linksom om te controleren of het boortje goed is uitgelijnd en zonder afwijking draait. Als er een verkeerde uitlijning wordt gedetecteerd, maakt u de spankop los waarna u het boortje weer vastzet door de vorige stappen te volgen.
Opmerking: Om het boortje te verwijderen, herhaalt u de bovenstaande procedure en draait u de spankop linksom.
- 6** Procedureconfiguratie voltooid - De boor is nu correct ingesteld en klaar voor de procedure.





Lees beide zijden van deze instructies

Aanvullende informatie

Contra-indicatie: N.v.t. Houdbaarheid: Zie productetikettering.

Opslag en transport: Zorg ervoor dat het product wordt bewaard in een schone, droge omgeving en in direct zonlicht.

Verklaring van symbolen

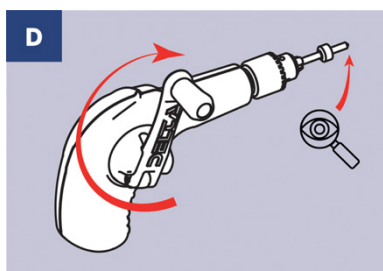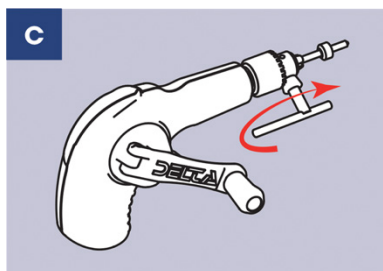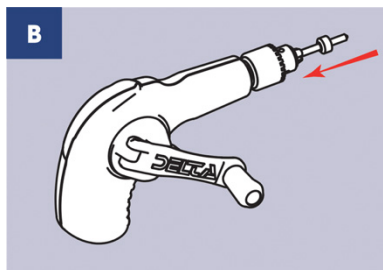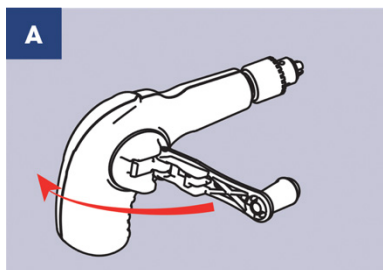

Fabrikant



Fabricagedatum



Distributeur



Uiterste gebruiksdatum



Niet opnieuw gebruiken



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is



Uit de buurt van zonlicht houden



Droog houden



Batchcode



Bestelnummer



Gemachtigde in de Europese Gemeenschap



CE-markering



Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is



Aanduiding dat een drager een unieke code ter identificatie van het hulpmiddel bevat



Let op



Geeft een medisch hulpmiddel aan dat niet is onderworpen aan een sterilisatieproces



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing