



Broca manual

Instruções de utilização

V2 de junho de 2025

Informações importantes

Leia antes da utilização

Indicações:

A broca manual Delta é indicada quando é necessária perfuração em conjunto com uma ponta de broca adequada (não fornecida).

Contraindicações:

Este dispositivo não foi concebido, vendido ou destinado a qualquer utilização que não a indicada.

Complicações:

A ponta de broca pode soltar-se no mandril de broca. Certifique-se de que o mandril está totalmente apertado antes da utilização.

Precauções:

Para evitar o deslizamento da ponta de broca, rode lentamente até a ponta de broca estar totalmente encaixada.

Descrição:

Broca manual Delta D-5001-CM.

Esterilidade:

A broca manual Delta destina-se a uma única utilização; não a reesterilize.

Fabricante



Name: Shenzhen Ruixie Industrial Co. Ltd.
Address: East Side, 1/F., No.1 Building, Hengguan Industry Zone, Xinqiao Shajing, Baoan, Shenzhen, China

Representante Europeu



Name: MedPath GmbH
Address: Mies-van-der-Rohe Strabe 8, Munich, 80807 DE



Broca manual
Instruções de utilização



+44 (0)1782 637009

sales@deltasurgical.co.uk

Cuidado

Leia todas as instruções antes da utilização

Este produto destina-se a uma única utilização; não o reutilize.

- Não utilizar se a embalagem interna ou o produto estiverem danificados
- Não utilize este produto após o prazo de validade
- Utilize apenas pontas de broca aprovadas*
- O produto é um dispositivo médico. Os utilizadores têm de garantir que possuem a experiência e a formação clínica relevantes antes da utilização
- Leia e compreenda as instruções antes de utilizar esta broca manual descartável*
- Antes de cada utilização, maneje o dispositivo rodando o punho e o mandril de broca no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, respetivamente, e inspecione cada componente quanto a danos. NÃO utilize qualquer componente se forem detetados danos*
- Não aplique pressão excessiva; deixe a ponta de broca rodar livremente*
- A velocidade de rotação adequada é importante para a intervenção cirúrgica. Rode o punho cuidadosamente e lentamente
- Depois de instalar a ponta de broca, inspecione-a e certifique-se de que está fixa antes de utilizar a broca manual
- Elimine a broca manual usada de acordo com as leis e regulamentos do método de eliminação de resíduos médicos. O incumprimento pode resultar em poluição ambiental e lesões humanas

***O incumprimento pode resultar em lesões no doente e/ou nos profissionais de saúde**

Leia ambos os lados destas instruções

Instruções de utilização

- 1** Execute todos os procedimentos de acordo com as técnicas e os protocolos clínicos estabelecidos.
- 2** Fixação do punho – Desdobre o braço do punho e bloqueie-o na posição aberta. Verifique se o punho está bem apertado (consulte a Figura A).
- 3** Seleção e instalação da ponta de broca – Selecione a ponta de broca adequada para o procedimento e insira-a no mandril, conforme ilustrado na Figura B.
NOTA: Para alargar o mandril e o ajustar ao diâmetro da ponta da broca, rode o mandril no sentido dos ponteiros do relógio.
- 4** Fixação da ponta de broca – Aperte a ponta de broca utilizando a chave de mandril fornecida para garantir que está bem fixa na devida posição. Aplique pressão uniforme rodando a chave do mandril no sentido dos ponteiros do relógio em todos os três pontos designados, assegurando um alinhamento preciso (consulte a Figura C).
- 5** Verificação do alinhamento da broca – Rode o punho no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para confirmar que a ponta de broca está corretamente alinhada e que roda sem desvio. Se for detetado algum desalinhamento, desaperte o mandril e volte a fixar a ponta da broca seguindo os passos anteriores.
Nota: Para remover a ponta da broca, repita o procedimento acima, rodando o mandril no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 6** Configuração do procedimento concluída – A broca está agora corretamente configurada e pronta para o procedimento.





Leia ambos os lados destas instruções

Informações adicionais

Contraindicação: N/A. Prazo de validade: Consulte o rótulo do produto.

Armazenamento e transporte: Certifique-se de que o produto é armazenado num ambiente limpo e seco, e ao abrigo da luz solar direta.

Guia de símbolos

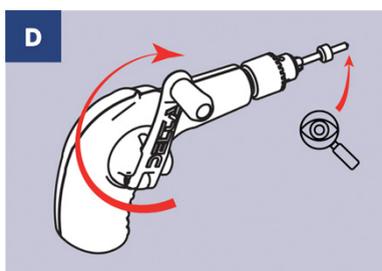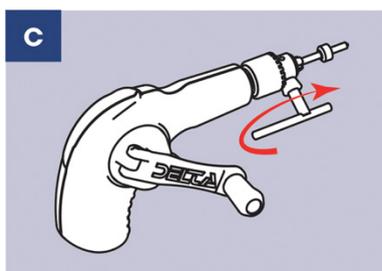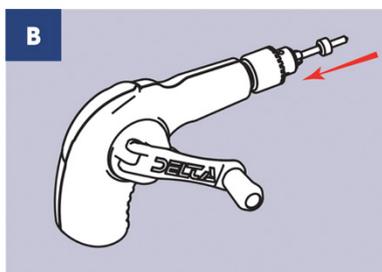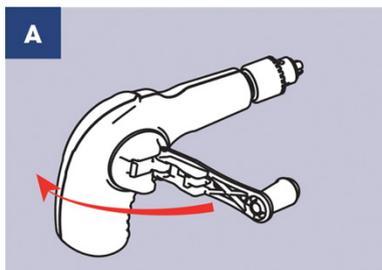

Fabricante



Data de fabrico



Distribuidor



Utilizar até



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Manter afastado da luz solar



Manter seco



Código de lote



Número de encomenda



Mandatário na Comunidade Europeia



Marcação CE



Indica que o artigo é um dispositivo médico



Indica um portador que contém um identificador único de dispositivo



Cuidado



Indica um dispositivo médico que não foi submetido a um processo de esterilização



Consultar as instruções de utilização